

IVF Pasteurpipetten


- in den Größen 14,6 und 22,9 cm
- mit oder ohne Baumwollstopfen

intensive Reinigung

- HPLC-Reinstwasser im Ultraschallbad
- Inkubation bei 200 °C über 8 Stunden
- Spülung mit Flusssäure

sorgfältige Tests

- mindestens 10% der Pipetten werden nach jedem Verarbeitungsschritt MEA-, LAL- und sterilitätstestet.

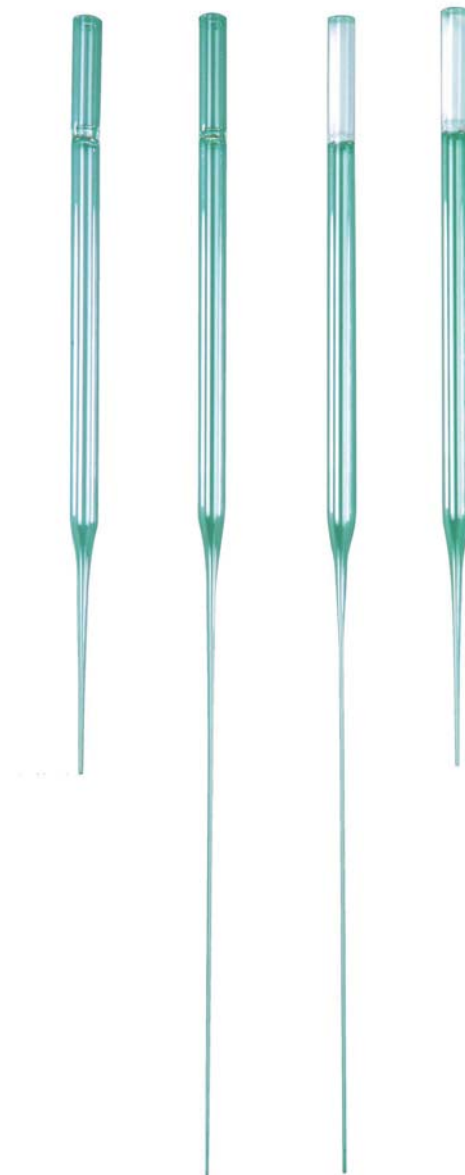



Bestellinformationen

Pasteurpipetten	Artikelnummer
Box mit 30 x 3 Stück, L: 14,6 cm	PP-5.75-90
Box mit 30 x 3 Stück, L: 14,6 cm, mit Stopfen	PP-5.75-90PL
Box mit 20 x 50 Stück, L: 14,6 cm	PP-5.75-1000
Box mit 20 x 50 Stück, L: 14,6 cm, mit Stopfen	PP-5.75-1000PL
Box mit 30 x 3 Stück, L: 22,9 cm	PP-9-90
Box mit 30 x 3 Stück, L: 22,9 cm, mit Stopfen	PP-9-90PL
Box mit 20 x 50 Stück, L: 22,9 cm	PP-9-1000
Box mit 20 x 50 Stück, L: 22,9 cm, mit Stopfen	PP-9-1000PL