
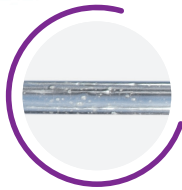



ウォーレス シュアプロ・ウルトラ

サポーター付き超音波可視性ETカテーテル

シュアプロ・ウルトラ製品群は、シュアビューカテーテル独自の高エコー特性を特徴とし、これまでの製品で利点が認められた、ハンドメイドで作り上げた柔らかなカテーテルチップを継承しています。

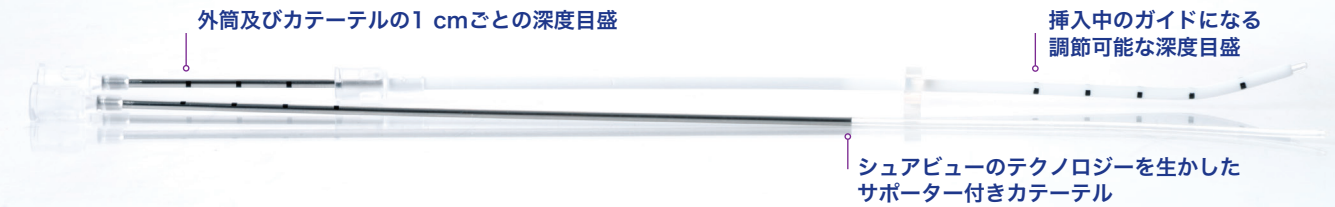

カテーテル長全体に認められるシュアビューの微小気泡

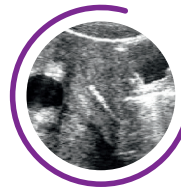

断面からは微小気泡と滑らかなインナールーメンが認められる



子宮内のシュアビューカテーテル

ウォーレス アーティフィシャル

インセミネーション・カテーテル

ウォーレスアーティフィシャル・インセミネーション・カテーテルは、高品質で、子宮内での留置のコントロールを適切なものにする滑らかな先端と、自在に形状を変えられる外筒を特徴としています。2つの部品からなるデザインはウォーレスクラシックカテーテルのものと同じで、胚移植手技の訓練にも適しています。



販売名：Wallaceアーティフィシャルインセミネーションカテーテル
届出番号：14B2X10037000001

製品の主な特長

- ・ 形状記憶の外筒は自在に形状を変えられるため、挿入しやすくなるようあらかじめ曲げておくことが可能
- ・ 外傷を抑え、成功率を高める滑らかな球状の先端¹³
- ・ ウォーレス ETカテーテルと同等のカテーテルデザインを採用し、効果的な技術の発展をサポート
- ・ 両側面の穴で、閉塞リスクを抑え、精子が注入しやすいデザイン
- ・ 困難な手技用のウォーレス スタイルレットとの互換性



コントロールしやすい設計のハブ



両側面の滑らかな穴

ウォーレス アーティフィシャル・インセミネーション・カテーテル

| 技術情報 | |
|----------------------------|----------|
| カテーテルの内径 | 1.07 mm |
| カテーテルの外径 | 1.58 mm |
| 外筒の外径 | 2.3 mm |
| 外筒からのスタイレットの突出 | 2.0 mm |
| ハブを含まないカテーテル容量(18 cmカテーテル) | 0.17 mm |
| カテーテル1 cmあたりの容量 | 0.009 mm |

製品の互換性及び製品番号

販売名：Wallaceアーティフィシャルインセミネーションカテーテル
届出番号：14B2X10037000001

| | アーティフィシャル・インセミネーション |
|---|--|
| | AIC18 入り数:10-アーティフィシャル・インセミネーション・カテーテル (18 cm) |
| 互換性のある製品 | |
| 1816ST 入り数:10 18 cm胚移植用(ET)カテーテル導入用スタイレット | ✓ |

ウォーレス シングルルーメン オーサイト・リカバリー・セット

| 技術情報 | 16G | 17G | 18G |
|----------------|---------|---------|---------|
| ニードル内径 | 1.24mm | 1mm | 0.95mm |
| ニードル外径 | 1.7mm | 1.42mm | 1.25mm |
| ハブを含まないニードル容量 | 0.435ml | 0.283ml | 0.255ml |
| ニードル1 cmあたりの容量 | 0.012ml | 0.008ml | 0.007ml |
| エコーマーキング長 | 22mm | 22mm | 22mm |
| 真空チューブの長さ | 480mm | 480mm | |
| 吸引チューブ内径 | 1.52mm | 1.31mm | 1.14mm |

製品の互換性及び製品番号

販売名：ウォーレス・オーサイト・リカバリー・システム
承認番号：21100BZY00123000

| | オーサイト・リカバリー・ニードル* | オーサイト・リカバリー・セット | |
|-----------------|---------------------------------------|--|--|
| | ON1733 入り数:10 17 Gニードル 33 cm | ONS1733 入り数:10 17 Gニードル 33 cm | ONS1833 入り数:10 18 Gニードル 33 cm |
| 互換性のある製品 | | | |
| 500 mm吸引チューブに適合 | | ✓ | ✓ |
| 750 mm吸引チューブに適合 | | ✓ | ✓ |
| 950 mm吸引チューブに適合 | | ✓ | ✓ |

* 950 mmのチューブの製品番号は上記のとおりです。チューブ長が750 mm及び500 mmの場合は、上記のコードに-750又は-500を付けてください

✓=互換性あり